



## Monovac Sekret Sack Typ II

Inhalt: 1,4 Liter maxi.


Lagerung: Zwischen  $-10^{\circ}\text{C}/+40^{\circ}\text{C}$  an trockenem und sauberem Ort.

⊗ EINWEG UNSTERIL **CE**

- 1 Sack herausziehen und ihn in die Flasche einsetzen, nun Deckel gut zudrücken.
- 2 Darauf achten, dass der Hahn «ON/OUVERT» in horizontaler Position ist, Aufschrift nach oben.
- 3 Den Schlauch der Quelle Vakuum mit dem Nippel VACUUM verbinden und den Schlauch der Quelle Patient mit dem Nippel PATIENT verbinden.
- 4 Sobald die Absaugung vollendet ist, sollen Schläuche VACUUM und PATIENT herausgezogen werden. Drehen Sie den Hahn auf  $180^{\circ}$ . Nun soll er in horizontaler Position stehen, Aufschrift nach oben: «OFF/FERME»

Den Ausgang PATIENT mit dem Deckel/Hütchen schliessen.

- 5 Den MONOVAC Sack aus dem Behälter herausziehen.

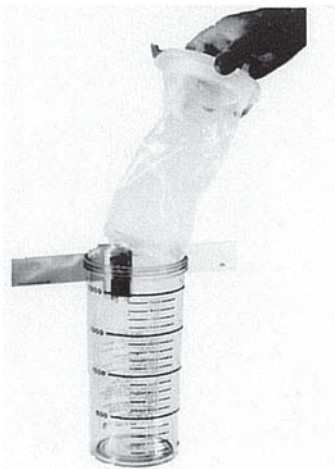

## Poche Monovac Type II

Contenance: 1,4 litre maxi.

Stockage: Entre  $-10^{\circ}\text{C}/+40^{\circ}\text{C}$  dans un lieu sec et propre.

⊗ USAGE UNIQUE NON STERILE **CE**

- 1 Etirer bien la poche et l'introduire dans le bocal en exerçant une pression sur le couvercle.
- 2 Contrôler que le robinet «ON/OUVERT» soit bien en position horizontale, inscription vers le haut.
- 3 Brancher le tuyau en provenance de la prise de vide sur le côté «VACUUM» et le tuyau d'aspiration patient sur le côté «PATIENT».
- 4 Une fois terminée l'aspiration, débrancher le tuyau du côté «VACUUM», puis du côté «PATIENT». Tourner le robinet d'un  $1/2$  tour, celui-ci se trouve en situation «OFF/FERME».

Fermer l'entrée «Patient» à l'aide du bouchon.

- 5 Sortir la poche «MONOVAC» du bocal.

**8088** Universalhalter mit T-Profil 5x25  
Support universel avec T-profil 5x25  
Universal support with T-section 5x25  
Supporto universale con profilo a T 5x25

**8070b** 2 Liter-Flasche zu Monovac Sekret-Sack  
Bocal 2 litres pour le sachet sécrété Monovac  
2 litre bottle for Monovac secretion bag  
Bottiglia 2 litri per sacchetto secrezioni Monovac

**8070c** Monovac Sekret-Sack mit Überlaufsicherung  
Sachet Monovac sécrété avec sûreté de trop-plein  
Monovac secretion bag with anti-overflow device  
Sacchetto secrezioni Monovac con protezione di troppopieno

Technische Änderungen vorbehalten

## Sacco per secreti Monovac Modello II

Capacità massima: 1,4 litri

Condizioni di conservazione:  $-10^{\circ}\text{C}$  a  $+40^{\circ}\text{C}$ , in luoghi asciutti e puliti

⊗ MONOUSO E NON STERILE **CE**

- 1 Stendere il sacco ed introdurlo nel vaso chiudendo con forza il coperchio.
- 2 Verificare che il rubinetto «ON/OUVERT» sia in posizione orizzontale (iscrizione verso l'alto).
- 3 Raccordare il tubo della presa vuoto centralizzato sul lato «VACUUM» e quello d'aspirazione lato «PAZIENTE».
- 4 Al termine dell'aspirazione, staccare il tubo cominciando dal lato «VACUUM» poi continuare staccando il lato «PAZIENTE». Chiudere il rubinetto girandolo mezzo giro dalla parte «OFF/FERME», chiudere l'imboccatura «Paziente» con l'apposito tappo.
- 5 Infine, estrarre il sacco «MONOVAC» dal vaso.